

ADMIRA® FUSION

Pirmoji pasaulyje Universalinė nanohibridinė restauracinė medžiaga
ORMOCER® ("Organiškai modifikuota keramika") pagrindu.

ADMIRA® FUSION privalumai

- turi mažiausią polimerizacinį susitraukimą (1,25 % pagal tūrį), sukelia ypatingai mažą susitraukimo stresą
- geras biosuderinamumas
- turi 84 % (pagal svorį) neorganinių užpildo dalelių, todėl naudojimo indikacijos yra plačios.
- ypatingai didelis spalvos stabilumas - suteikiantis universalias naudojimo galimybes, nes išpildo aukščiausius reikalavimus tiek priekinių, tiek galinių dantų srityse
- dėl medžiagos homogeniškumo su ja labai lengva dirbti,
- galima naudoti su visais įprastais surišikliais.



Rinkinys - 5 švirkštai po 3g
(A2, A3, GA3,25, A3,5,
Admira Fusion x-tra),
Futurabond U 20 dozių,
spalvų raktas

Sutaupote
30%

Švirkštai - po 3g
(spalvos pasirinktinai)

4+1

ADMIRA® FUSION X-TRA

- **ADMIRA® FUSION** versija greitam darbui sluoksniais iki 4 mm
- Universalinė spalva su puikiu chameleono efektu

Švirkštai - po 3g (universalinė spalva)

4+1



ADMIRA® FUSION Flow

- Ypatingai mažas susitraukimas (2,75% pagal tūrį)
- Tikslus medžiagos aplikavimas ir dozavimas



Rinkinys - 5 švirkštai po
2g (A1, A2, A3, A3,5, W0)

Sutaupote
30%

Švirkštai - 2x2g (spalvos pasirinktinai)

4+1

CleanJoy® dantų valymo ir poliravimo pasta

TIESIOG PRAKTIŠKA

Indikacijos

Minkštų ir kietų paviršiaus apnašų pašalinimui

Taip pat spalvos pasikeitimo (pvz.: nuo kavos, arbatos ar tabako) pašalinimui

Dantų paviršių poliravimui prieš balinant arba po ortodontinio gydymo

Restauracijų valymui ir poliravimui

Laikino užpildo likučių pašalinimui

Privalumai

- Stabili, vienalytė konsistencija
- Nėra purslų (2 000–3 000 aps / min)?
- Be parabenų
- Trijų grubumų
raudona (RDA 195) grubi – aukštas valymo pajėgumas,
geltona (RDA 127) vidutinė – vidutinis valymo pajėgumas,
žalia (RDA16) švelni – poliravimui
- Spalvinis kodavimas – raudona, žalia, geltona
- Galima naudoti su bet koku įprastiniu instrumentu (mažu šepetėliu, poliruokliu ir kt.)
- Sudėtyje yra fluoro (700 ppm) ir ksilitolio
- Trijų skonių: mėtų, karamelės, vyšnios



PUIKUS PASIŪLYMAS ! 2+1

3-jų CleanJoy poliravimo pastų tūbelių rinkinys tik už 2-jų tūbelių kainą

2992 CleanJoy 3x100g vyšnių skonio

2993 CleanJoy 3x100g mėtų skonio

2994 CleanJoy 3x100g karamelės skonio

Ekonomiškas VOCO LAIKINŲ MEDŽIAGŲ RINKINYS



(Art.Nr 2502)

Temporary Set: 1 x Structur 3 (A3-50 ml); 1 x Provicol QM (5ml); 1 x Clip Flow (2 šv. x 1,8 g)



1. Structur 3

- Estetiška kompozito (nano užildo) medžiaga, skirta formuoti laikiniems vainikėliams ir tiltams, įklotams ir užklotams.
- Itin stiprus mechaninis atsparumas (atsparumas spaudimui 500 MPa) ir puikus elastingumas - puikiai tinka kelių vienetų tiltams.
- Atsparus įtrūkimams, net jei naudojamas plonu sluoksniu, pvz., vainikėlių kraštams arba plonomis laminatėms.
- Be metilo metakrilato, žema polimerizacijos temperatūra - neturi poveikio pulpai.
- Žemas polimerizacinis susitraukimas - puikiai prisitaiko.
- Saugo nuo įbrėžimų, nekeičia spalvos - patvarios laikinos restauracijos.
- Natūralaus danties fluorescencinis efektas ir platus spalvų pasirinkimas - laikina restauracija labai panaši į natūralų dantį.
- Paviršiaus blizgumas išgaunamas iš karto - nereikia poliruoti. Laikinus protezus reikia tik nuvalyti etilo alkoholiu, kad būtų pašalintas inhibicinis sluoksnis.
- Kietėjimo laikas burnoje - **tik 60 sekundžių**. Pilnumoje medžiaga sukietėja per **4 min.**
- Automatinio maišymo kartridžas (1:1) - patikimas ir patogus naudojimas.

2. Provicol QM

Automatiškai maišomas, laikino fiksavimo cementas be eugenolio (neįtakoja surišimo sistemų ir dervinių cementų kietėjimo) su kalcio hidroksidu (bakteriocidinis poveikis, sumažina antrinio karieso riziką).

Cementas yra skirtas laikinų vainikėlių ir tiltų tvirtinimui, taip pat laikinam nuolatinių restauracijų tvirtinimui. Optimalus sukibimas, bet lengva pašalinti.

3. Clip Flow

Taki, šviesoje kietėjanti medžiaga visų rūšių laikiniams užpildams, hermetikams ir gydymo būdams, įskaitant įklotus ir užklotus.

Taip taip naudojama: pritvirtinti laikinus vainikėlius ir tiltus, laikinam užpildymui gaminant įklotus ir užklotus, dantenų krašto padengimui kabinetinio balinimo metu, dervinių matricų fiksavimui plombavimo metu, implanto (abatemento) atramos angų uždarymui/ izoliavimui.

Medžiaga specialiuose NDT® švirkštuose gali būti lengvai ir tiksliai nukreipiama tolygiai ištekėti į ertmę, pasiekiant gerą kraštinę adaptaciją. Dėka greito kietėjimo šviesoje **Clip Flow** gali pasiekti pakankamą elastingumą, kad užtikrintų ypač gerą laikinos medžiagos pašalinimą vienu gabalu prieš nuolatinę restauraciją, ir jokių darbų ertmėje atlikti daugiau nebereikia. **Clip Flow** turi gerą atsparumą krūviui ir seilėms, sandari kraštuose, todėl yra saugi laikinam užpildui.

Kietinimas polimerizacine lempa (mažiausiai 500 mW/cm²):

sluoksnį iki 1 mm - 10s, sluoksnį iki 5 mm - 20s, daugiau nei 5 mm - 40s

Ekonomiškas VOCO profilaktikos rinkinys

Rinkinio sudėtis:

- 2 x 100 gr. CleanJoy (127 RDA ir 16 RDA)
- 1 x 40 gr. Remin Pro
- 12 x 0.4 ml. Profluorid Varnish SingleDose
(po 3vnt. šių skonių: melionų, karamelės, mėtų, vyšnių)
- 2 x 2 gr. Grandio Seal



Clean Joy - **dantų valymo ir poliravimo pasta,**

Remin Pro - **apsauginis dantų kremas melionų skonio, sudėtyje yra fluoro (1450 ppm),**

Profluorid Varnish – **savaiminio kietėjimo lakas dantų jautrumui mažinti**

Grandio Seal – **baltos spalvos silantas:**

Grandio Seal INDIKACIJOS:

- vagelių ir duobučių padengimui/plombavimui,
- pažeisto emalio paviršių padengimui/atstatymui,
- padengimui karieso pažeistų zonų ortodontinio gydymo metu,
- kompozitinių arba cementinių plombų tarpelių padengimui
(apsauginis sluoksnis nuo drėgmės),
- padengimui pieninių dantų.

Grandio Seal PRIVALUMAI:

- užpildas - neorganinis/nanohibridinis,
- fluoro kiekis (pagal svorį) - 1 % NaF,
- užpildo kiekis -70,2 %,
- prisirišimas prie emalės -16,9 Mpa,
- atsparumas skersinėms jėgoms -130 Mpa.

VOCO Profluorid Varnish dantų jautrumui mažinti

INDIKACIJOS:

- Jautrių dantų gydymui,
- Dentino kanalėlių uždarymui (pvz. preparuotoms ertmėms ar jautriems šaknų paviršiams),
- Kaklelių defektų gydymui,
- Emalio defektų gydymui,
- Ėduonies pažeidimų gydymui,
- Po dantų valymo ir poliravimo atstatyti pažeistas kalcio fluorida atsargas,
- Fluoravimui,
- Mineralizacijos skatinimui.

PRIVALUMAI:

- Baltas /permatomas lakas savaiminio kietėjimo
- Labai atsparus drėgmei ir gerai laikosi ant kietųjų danties audinių,
- Vienalytė konsistencija leidžia lengvai ir plonu sluoksniu aplikuoti,
- Sudėtyje yra fluoro [22.600 ppm/ 5% natrio fluorida] - greitas nujautrinimas,
- Sudėtyje yra kaniifolijos - labai gera adhezija ant drėgnų paviršių,
- Sudėtyje yra ksilitolio - bakteriostatinės savybės,
- 6 skonių: melionų, mėtų, vyšnių, karamelės, krantamos gumos, kolos su laimo gaivumu (naujas skonis),
- Visi skoniai yra išleidžiami praktiškai vienkartinėse dozėse – SingleDose:
 - higieniška, tinkama apsauga pacientui ir personalui (išvengiama kryžminės taršos),
 - paprasta ir greita aplikacija,
 - mežiagos kiekis optimalus vienam gudumui, nepadidėja išeiga.
- Taip pat visi skoniai yra išleidžiami 10 ml tūbelėse.




VOCO Retraction Paste (retrakcinė pasta su hemostatiku)



Kapsulėje yra 0,3 g medžiagos, kurios užtenka iki 3 dantų paruošimui;
Pakanka 2 minučių efektyviam dantenų atitraukimui, išvalymui ir išdžiovinimui;
Ilgas plonas kapsulės snapelis leidžia lengvai įvesti pastą tiesiai į dantenų vagelę.

- Efektyviai atveria dantenas.
- Dantenų vagelė tampa švari ir sausa, hemostazė trunka pakankamą laiką dėl sudėtyje esančio aliuminio chlorido.

Lengva pašalinti, naudojant vandens bei oro mišinį, su atsiurbimo įrenginio pagalba;
Žymiai greitesnė procedūra nei naudojant retrakcinius siūlus;
Kapsulę galima naudoti su visais kompozitų dozavimo pistoletais.

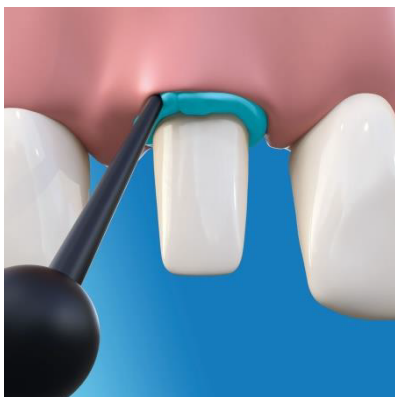

Užsakymo kodai su PVM:

1013 VOCO Retraction Paste - Caps 100 x 0,3 g

1012 VOCO Retraction Paste - Caps 25 x 0,3 g

VOCO Clip® Flow – pirmoji taki plombavimo medžiaga laikinam atstatymui

Clip Flow yra taki, šviesoje kietėjanti medžiaga visų rūšių laikiniams užpildams, hermetikams ir gydymo būdams, įskaitant **įklotus ir užklotus**.

Clip Flow taip naudojama:

- pritvirtinti laikinus vainikėlius ir tiltus,
- laikinam užpildymui gaminant įklotus ir užklotus,
- dantenų krašto padengimui kabinetinio balinimo metu,
- dervinių matricų fiksavimui plombavimo metu,
- implanto (abamento) atramos angų uždarymui/ izoliavimui,

Medžiaga specialiuose NDT® švirkštuose gali būti lengvai ir tiksliai nukreipiama tolygiai ištekėti į ertmę, pasiekiant gerą kraštinę adaptaciją. Dėka greito kietėjimo šviesoje **Clip Flow** gali pasiekti pakankamą elastingumą, kad užtikrintų ypač gerą laikinos medžiagos pašalinimą vienu gabalu prieš nuolatinę restauraciją, ir jokių darbų ertmėje atlikti daugiau nebereikia. **Clip Flow** turi gerą atsparumą krūviui ir seilėms, sandari kraštuose, todėl yra saugi laikinam užpildui.

Kietinimas polimerizacine lempa (mažiausiai 500 mW/cm²):

- sluoksnį iki 1 mm - 10s
- sluoksnį iki 5 mm - 20s
- daugiau nei 5 mm - 40s

REF 1282

2 švirkštai x 1,8 g, 20 x aplikavimo kaniulių (Nr. 46)



TWINKY STAR SPALVOTOS PIENINIŲ DANTŲ RESTAURACIJOS

INDIKACIJOS

Kompomeras pieninių dantų restauracijoms

PRIVALUMAI

- Aštuoni patrauklūs atspalviai, pasižymintys blizgesio efektu
- Greitas ir paprastas aplikavimas tiesiai iš kapsulių
- Labai patinka vaikams
- Vaikai pamiršta apie baimę odontologams
- Tėvams lengviau prikalbinti vaikus lankytis pas odontologą
- Puikiai poliruoja
- Išskiria fluoridus, stabdo ėduonies vystymąsi
- Spalvų raktas atitinka originalius atspalvius
- Medžiaga pagaminta panaudojant išbandytą VOCO kompomerų technologiją
- Puikios savybės

KAPSULIŲ [25X0,25G]

UŽSAKYMO KODAI

- 1681 Auksinė spalva
- 1682 Sidabrinė spalva
- 1683 Mėlyna spalva
- 1684 Rausva spalva
- 1685 Žalia spalva
- 1686 Oranžinė spalva
- 1687 Citrinų spalva
- 1688 Gervuogių spalva



ŠVIRKŠTŲ UŽSAKYMO KODAI

- 1693 Švirkštas 2g, mėlyna spalva
- 1694 Švirkštas 2g, rausva spalva

RINKINIŲ UŽSAKYMO KODAI:

- 1680 – 40 kapsulių rinkinys po 0,25g, spalvų raktas
- 1679 – 40 kapsulių rinkinys po 0,25g, spalvų raktas, Futurabond M vienkartinės dozės 50vnt

